



Recomendaciones

- ★ **No utilices pilas recargables** porque no tienen la potencia necesaria.
- ★ **Evita golpes en la bomba** porque pueden alterar su funcionamiento.
- ★ Si se rompe la tapa donde van las pilas o la lengüeta, **debes dar aviso al personal de enfermería.**
- ★ **La bomba no debe estar cerca de aparatos de resonancia magnética** ya que puede alterar resultados de electrocardiogramas.
- ★ **No mojes la bomba** al momento de ducharte. Ten cuidado o no lo hagas mientras estés con la bomba.
- ★ Durante la noche instala la Bomba CADD debajo de tu almohada.

¡Contáctanos!

Ubicación

Centro Médico Manuel Montt:
Manuel Montt 427, Providencia, Santiago, Chile

Horario de atención

Lunes a jueves de 8:30 a 18:15 horas
Viernes de 8:30 a 17:00 horas

Correo electrónico

unidadquimioterapia@oncovida.cl

Teléfono de contacto

+(56) 2 2599 2900

www.oncovida.cl/



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Oncovidachile



Estudios Clínicos

¡Una gran oportunidad de
tratamiento oncológico **sin costo**
para todos quienes puedan
participar de ellos!



Descubre más sobre
Estudios Clínicos



Completa este formulario
para proponer tu caso



oncovida
red nacional de oncología



Conoce más sobre el

USO DE BOMBA CADD EN DOMICILIO

"somos tu red de apoyo"

¿Qué es una Bomba CADD?

Es un dispositivo por el que se administra la quimioterapia a una velocidad programada por el equipo de enfermería según la indicación de tu médico. El objetivo principal es brindar una mayor seguridad durante tu tratamiento en el hogar.

La Bomba CADD utiliza dos pilas AA. Te recomendamos no usar pilas recargables.



Dos pilas AA Bomba CADD

Entrega del bolso

Al inicio de tu tratamiento te entregarán un bolso donde podrás guardar tu Bomba CADD. Debes saber que este es de uso personal y debes llevarlo a cada sesión de quimioterapia que tengas.

En caso de que lo pierdas debes informarlo al personal de la Unidad de Quimioterapia.

¿La bomba puede entregar algunas alarmas!

El dispositivo puede sonar por algunos de los siguientes motivos:

A. Presión elevada

 En este caso debes observar todo el circuito, buscando algún tipo de oclusión o clips cerrados. Si este es el caso, debes abrirlos y con el botón de **parada/inicio** reiniciar la infusión.

B. Volumen bajo

 Indica que pronto finalizará la infusión (**aprox. dentro de una hora**) y puedes acudir a nuestra unidad para el retiro de la máquina.

C. Dispositivo vacío

 Esto indica el fin de la infusión, por lo que debes acudir a nuestra unidad para el retiro o cambio de infusión según corresponda. Con el botón de **parada/inicio** puedes silenciar la alarma.



¿Cómo realizar el cambio de pilas en la bomba?

Si la pantalla indica **batería baja**, debes cambiar las pilas siguiendo estos pasos:

1. Detén la bomba

Presiona el botón **parada/inicio** hasta que se detenga.

2. Abre la tapa


Debes deslizar la tapa que está en la parte posterior de la bomba presionando el botón con la flecha indicada.

3. Retira las pilas

Retira las pilas usadas e instala las nuevas.

4. Cierra la tapa

Al instalar las pilas nuevas, desliza la tapa con cuidado porque es muy frágil.

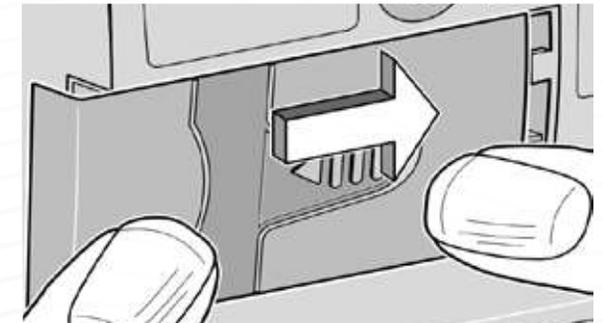

5. Reinicia la bomba

Mantén apretado el botón **parada/inicio** y se reiniciará. Debes saber que tiene una memoria interna, así es que realizará una verificación instantánea y quedará lista. En la pantalla debe aparecer FUNC y el volumen que queda por pasar.